

Masážní přístroj na nohy

Návod k obsluze

CZ



SENCOR®

SFM 3720GR

SFM 3721VT

Před použitím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu. Návod uschovejte pro budoucí použití.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

Masážní přístroj na nohy

SFM 3720GR / SFM 3721VT

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
POPIS MASÁŽNÍHO PŘÍSTROJE	5
POZITIVNÍ ÚČINKY MASÁŽNÍHO PŘÍSTROJE	6
POUŽITÍ MASÁŽNÍHO PŘÍSTROJE	6
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	7
TECHNICKÉ ÚDAJE	8
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM	8
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	8

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tento přístroj mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání přístroje bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Přístroj a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.

Masážní přístroj na nohy

SFM 3720GR / SFM 3721VT

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Přístroj je určen pro použití v domácnosti.
- Před připojením přístroje k síťové zásuvce se ujistěte, že se shodují technické údaje uvedené na jeho typovém štítku s elektrickým napětím zásuvky.
- Rozhodnete-li se používat přístroj v koupelně, pro zabezpečení doplňkové ochrany se doporučuje instalace proudového chrániče (RCD) se jmenovitým vybavovacím proudem nepřesahujícím 30 mA do obvodu elektrického napájení koupelny. Požádejte o radu elektrikáře.
- Přístroj nepoužívejte v těsné blízkosti vany, sprchy, umyvadla, bazénu apod.
- Přístroj nepoužívejte venku. Nevystavujte jej přímému slunečnímu záření. Neumísťujte jej do blízkosti otevřeného ohně nebo přístrojů, které jsou zdrojem tepla.
- Přístroj používejte na rovném, suchém a stabilním povrchu.
- Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, přístroj ani jeho síťový kabel neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- Nepřipojujte zástrčku síťového kabelu k zásuvce el. napětí ani ji neodpojujte, jsou-li vaše chodidla ponořena ve vodě.
- Přístroj používejte pouze v sedě. Do masážní vaničky nestoupejte vlastní vahou ani do ní neodkládejte žádné předměty.
- Tento přístroj je vybaven topným tělesem. Osoby se sníženou citlivostí na teplo by měly dbát zvýšené opatrnosti při jeho používání.
- Přístroj nedoporučujeme používat v případech, že máte opuchlá chodidla, vyrážku, zanícenou nebo podrážděnou pokožku na chodidlech. Používání přístroje přerušete, pokud se dostaví bolest, pocity nevolnosti nebo pokud se objeví podráždění pokožky. V těchto případech konzultujte další použití se svým lékařem.
- Než přístroj připojíte k síťové zásuvce nebo jej odpojíte, ujistěte se, že ovládací knoflík je nastaven do pozice OFF (vypnuto).
- Přístroj vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud ho nebudete používat, před přemístěním nebo čištěním.
- Neodpojujte přístroj od síťové zásuvky tahem za síťový kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového kabelu nebo síťové zásuvky. Kabel odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku síťového kabelu.
- Přístroj s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. Pokud je síťový kabel poškozen, jeho výměnu svěťte odbornému servisnímu středisku.
- Přístroj nepoužívejte, nefunguje-li správně, vykazuje-li jakékoliv známky netěsnosti (uniká-li z něj voda), jestliže byl poškozen nebo ponořen do vody. Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte přístroj sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy tohoto přístroje svěťte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do přístroje během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.


Masážní přístroj na nohy

SFM 3720GR / SFM 3721VT

CZ

POPIS MASÁŽNÍHO PŘÍSTROJE

A

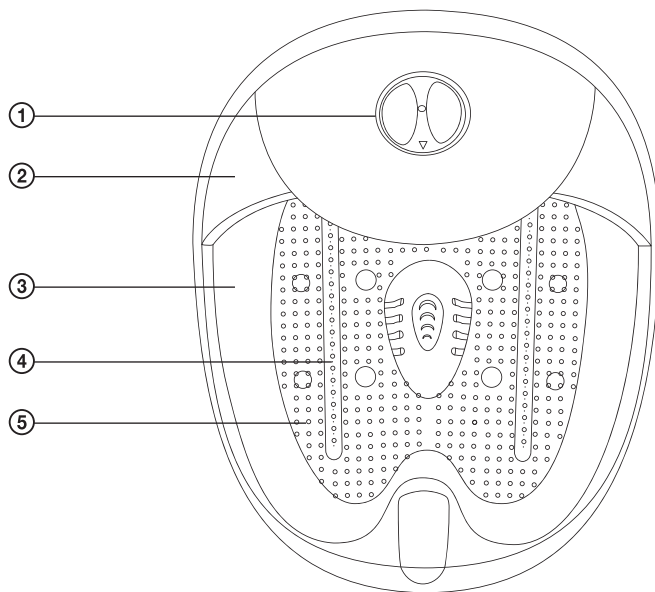

- ① Ovládací knoflík
slouží k nastavení provozního režimu a vypnutí přístroje
OFF (vypnuto) → MASSAGE (masáž) → WARM + VIBRATION (udržování teploty vody + bublinková lázeň) → MASSAGE + WARM + VIBRATION (masáž + udržování teploty vody + bublinková lázeň)
- ② Kryt masážní vaničky
- ③ Masážní vanička
- ④ Vzduchové trysky
- ⑤ Stimulační body

Masážní přístroj na nohy

SFM 3720GR / SFM 3721VT

POZITIVNÍ ÚČINKY MASÁŽNÍHO PŘÍSTROJE

- Stimulační body působí jako jemný dotyk prstů a zajišťují účinnou masáž chodidel. Intenzitu masáže lze snadno ovlivnit přitlačením chodidel na stimulační body nebo jejich nadlehčením. Vzduchové trysky vytvářejí příjemnou relaxační bublinkovou koupel. Teplá vodní lázeň podporuje pozitivní účinky masáže a bublinkové koupele. Proto je přístroj vybaven topným tělesem, které zabraňuje poklesu teploty vody v masážní vaničce. Pro rychlejší regeneraci, zlepšení krevního oběhu a prokrvení pokožky dopřejte svým chodidlům každý den příjemnou relaxační masáž v bublinkové vodní lázni.

POUŽITÍ MASÁŽNÍHO PŘÍSTROJE

1. Přístroj umístěte na rovný, suchý a stabilní povrch. Aby nedocházelo při jeho používání k posouvání, je vybaven protiskluzovými nožkami.
2. Ujistěte se, že je přístroj vypnutý. Ovládací knoflík A① je nastaven v poloze OFF (vypnuto).
3. Masážní vaničku A③ naplňte čistou vodou. Dbejte na to, aby hladina vody nepřesahovala rysku MAX, která je vyznačena uvnitř vaničky A③.



Poznámka:

Používejte pouze čistou vodu bez jakýchkoli příměsí, jako např. mýdla, šampónu apod.

4. Síťový kabel přístroje připojte k zásuvce el. napětí. Posadte se a ujistěte se, že vaše chodidla jsou čistá. Ponořte je do vodní lázně.



Upozornění:


Do vaničky A③ nestoupejte vlastní vahou. Jinak by mohlo dojít k jejímu poškození.

5. Ovládacím knoflíkem A① zvolte jeden z níže uvedených provozních režimů:

5.1 MASSAGE


Masáž chodidel ve vodní lázni bez dohřívání vody.

B

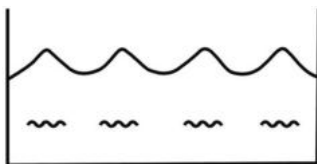


5.2 WARM + VIBRATION (BUBBLES)

Bublínková vodní lázeň s udržováním teploty vody, vhodná pro relaxaci a zklidnění chodidel.

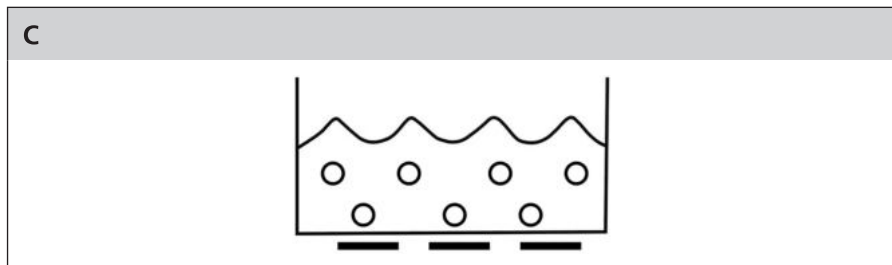

5.3 MASSAGE + WARM + VIBRATION (BUBBLES)

Masáž v dohřívané bublínkové vodní lázni, vhodná k regeneraci unavených chodidel, zlepšení krevního oběhu a prokrvení pokožky chodidel.

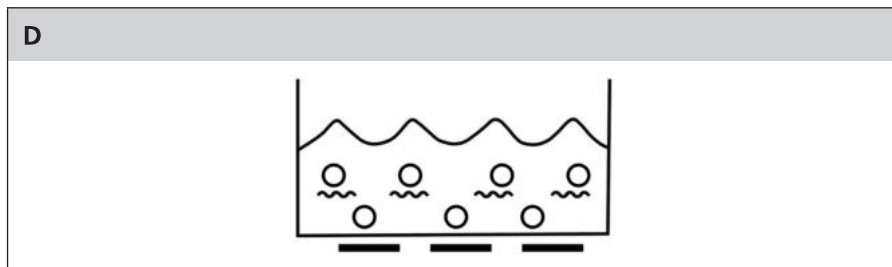

Poznámka:

Doporučená doba masáže je 15 min. Můžete ji upravit dle svých individuálních potřeb. Neměla by však překročit 30 min.

- Po ukončení používání otočte ovládací knoflík A① do polohy OFF (vypnuto). Chodidla vyjměte z vaničky A③ a osušte je ručníkem. Síťový kabel odpojte od zásuvky el. napětí. Po každém použití odstraňte z vaničky A③ vodu a vyčistěte ji dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním se ujistěte, že masážní přístroj je vypnutý a odpojený od zásuvky el. napětí.
- Po každém použití odstraňte z masážní vaničky A③ použitou vodu. Poté vaničku A③ vypláchněte čistou vodou a nechte ji vyschnout.
- Je-li znečištěn povrch přístroje, otřete jej hadříkem mírně navlhčeným ve vlažné vodě nebo ve slabém roztoku vlažné vody a neutrálního saponátu. Povrch, na který jste aplikovali saponát, otřete hadříkem navlhčeným v čisté vodě. Vše pak vytřete dosucha.
- Masážní přístroj neponořujte do vody.
- K čištění nepoužívejte brusné čisticí prostředky, ředidla, rozpouštědla apod.

Masážní přístroj na nohy

SFM 3720GR / SFM 3721VT

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí.....	230 V
Jmenovitý kmitočet.....	50 Hz
Jmenovitý příkon.....	90 W
Třída ochrany (před úrazem elektrickým proudem)	II
Stupeň ochrany před škodlivým vniknutím vody.....	IPX4

Vysvětlení technických pojmů

Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem:

Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.

Stupeň ochrany před škodlivým vniknutím vody:

IPX4 – Přístroj je chráněn proti stříkající vodě.

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.