




Shiatzu masážní přístroj

M 233



Návod k obsluze

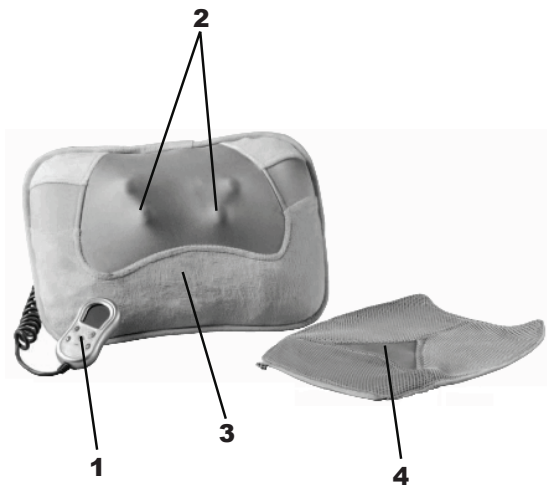

Úvod

Shiatsu je bezpochyby jednou z nejstarších a přirozených forem masážní terapie. Funguje stimulací povrchu kůže s třením a tlakem, čímž ihned účinkuje, kdy může každý prožít energickou masáž unavených částí těla.

Shiatsu je terapie zrozená v Japonsku na začátku 20-tého století, vynalezena určitými zkušenými maséry, kteří ji přinesly společně s moderním know-how a tradičními praktikami, vyvíjely techniku charakteristickou statickým tlakem na konkrétní body těla a mobilizací končetin a zad.

Použitím shiatsu masážního přístroje využíváte pohodlí prostředí.

Manipulace je většinou příjemná a uvolňující a obsahuje tlak aplikovaný několik sekund na přesná místa, se střídáním mobilizace. Přirozená mobilita není nikdy násilná a žádné napětí nezůstane neuvolněné (na rozdíl od tradičních masážních technik), protože funguje vyváženě. Tlak je vyvíjený v závislosti od pozice a požadované intenzity stimulace.

Je vhodnější neprovádět masáž přímo na kůži, ale přes nějaký oděv (i tenký).

S masážním přístrojem shiatsu nedoporučujeme použití olejů ani roztoků.

UPOZORNĚNÍ

**Přečtěte si pozorně tento návod.
Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou
instalaci, obsluhu a údržbu.**

**Uchovejte tyto pokyny pro případ příštího
použití.**

VAROVÁNÍ

Odložte si záruční list, doklad o koupi a tento návod k obsluze pro případ potřeby v budoucnosti.

Po vybalení zkontrolujte, zda není spotřebič poškozen. V případě viditelného poškození jej nepoužívejte a kontaktujte kvalifikovaného technika.

Nenechávejte části obalu v dosahu dětí. Tento spotřebič není hračka: je to elektrické zařízení a musí se s ním manipulovat opatrně.

Před připojením spotřebiče se ujistěte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí na výrobním štítku.

Pokud zástrčka a zásuvka nejsou kompatibilní, zásuvku musí vyměnit kvalifikovaný technik za vhodný typ.

Nepoužívejte adaptéry ani prodlužovací kabely, které nevyhovují platným bezpečnostním standardům.

Pokud nebudete přístroj používat, odpojte jej od elektrické sítě.

Neodpojujte přístroj tahem za přívodní kabel nebo za samotný přístroj.

Použití jakýchkoliv elektrických spotřebičů vyžaduje dodržování určitých základních pravidel, zejména:

- Nikdy se nedotýkejte spotřebiče mokřima nebo vlhkýma rukama.
- Spotřebič nesmí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými a mentálními schopnostmi nebo bez dostatečných zkušeností s obsluhou přístroje, dokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
- Nenechávejte spotřebič vystavený povětrnostním vlivům (déšť, slunce).
- Manipulujte se spotřebičem jemně.

V případě poškození nebo závady přístroje se jej nepokoušejte opravovat, odneste jej do servisního střediska.

Pokud již více nebudete přístroj používat, znefunkčňte jej odříznutím přívodního kabelu - samozřejmě po odpojení od elektrické sítě.

Přívodní kabel roztáhněte během použití na plnou délku, abyste zabránili přehřátí.

Pokud je poškozený přívodní kabel, musí jej vyměnit kvalifikovaný servisní technik.

Z bezpečnostních důvodů přístroj neotvírejte.

Spotřebič byl navržený a vyrobený pro použití v domácnosti.

Jakékoliv jiné použití je nevhodné a nebezpečné.

Pokud se během masáže budete cítit špatně, ihned přestaňte v masáži.

Spotřebič má ohřevnou plochu. Osoby choulostivé na teplo musí používat přístroj se zvýšenou opatrností.

Nepoužívejte přístroj déle než 15 minut.

Před opětovným použitím nechte přístroj zcela vychladnout.

Pokud máte zdravotní potíže týkající se nohou, jako je flebitida, křečové žíly, kožní ekzémy nebo podobné, konzultujte použití přístroje s doktorem.

V případě těhotenství, cukrovky nebo choroby, konzultujte použití přístroje s doktorem. Spotřebič není homologován pro medicínské využití.

Technické informace

- 1 - Ovládací jednotka.
- 2 - Masážní válečky.
- 3 - Ohřevná oblast.
- 4 - Látkový potah.



Tento přístroj byl vyrobený v souladu s platnými 2006/95/EC a 2004/108/EC směrnicemi. Technické údaje jsou na přístroji.

Pokyny k použití

Připojte napájecí kabel (v domácnosti nebo v autě) ke konektoru, pomocí kterého chcete napájet přístroj.


Umístěte přístroj na část těla, kterou chcete masírovat.

Pokud chcete masírovat záda, aplikujte jej na opěradlo židle nebo sedadla v autě; pokud požadujete masáž nohou, postavte jej na podlahu a položte přes přístroj část těla, kterou chcete masírovat.

Příslušenství (4) dodané s přístrojem lze snadno použít, což umožňuje oddělení těla od přístroje během masáže.

Zapněte přístroj stisknutím tlačítka ON/OFF na ovládací jednotce.

Ovládací jednotka

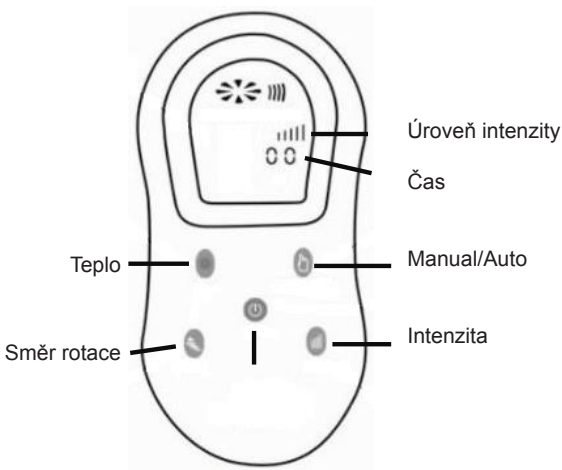

Dostupné funkce jsou následující:

Stiskněte tlačítko **MANUAL/AUTO**: pro automatický režim.

Přístroj funguje s postupným zvyšováním intenzity masáže a střídá rotaci ve směru a proti směru hodinových ručiček každých 30 sekund.

Stiskněte **MANUAL/AUTO**: pro manuální režim.

Přístroj používejte pouze s dodanými adaptéry.

Dodané adaptéry se smí používat pouze s tímto přístrojem.

Pomocí ovládací jednotky, stisknutím tlačítka **Intenzity** můžete změnit intenzitu masáže, tlačítkem **Směru** můžete změnit směr rotace masážních válečků.

Pro oba provozní režimy se zobrazí symbol rotace na displeji, úroveň intenzity masáže a doba trvání, která je naprogramovaná na odpočítávání od 30 minut.

Lze aktivovat funkci **ohřevu** v obou režimech.

Údržba

Tento přístroj nevyžaduje speciální údržby. Pravidelně jej čistěte.

Použijte jemnou, navlhčenou utěrku k čištění přístroje.

Nepoužívejte korosivní ani chemické prostředky.

Pozor: přístroj udržujte suchý.

Vyperte příslušenství (4) samostatně v rukách nebo v pračce (max. 40°C).

Před použitím s přístrojem jej nechte důkladně vyschnout.

Nesundávejte a nenamáčejte hlavní potah, který pokrývá přístroj.

NIKDY NEPONOŘUJTE PŘÍSTROJ DO VODY.

Záruční doba a podmínky

Záruka na tento spotřebič představuje 24 měsíců od data zakoupení. Tato záruka platí pouze tehdy, pokud je doložena dokladem o zakoupení. Záruka zahrnuje výměnu nebo opravu částí spotřebiče, které jsou se poškodí z důvodu poruch ve výrobě spotřebiče. Po uplynutí záruční doby bude spotřebič opraven za poplatek.

Výrobce neodpovídá za poškození nebo úrazy osob, zvířat z důvodu nesprávného použití spotřebiče a nedodržení pokynů v návodu k použití.

Omezení

Všechna práva této záruky ztrácí platnost z naší strany, pokud byl spotřebič:

- používán neoprávněnou osobou
- nesprávně používán, skladován nebo přenášen.

Záruka se netýká poškození vnějšího vzhledu nebo jiných, které nebrání standardní obsluze.

Kontakt na servis

Čertes spol. s.r.o., 28 října 35/168, 460 07 Liberec 7

Tel./fax: 482771487 - příjem oprav - servis.

Tel./fax: 482718718 - náhradní díly - vedení.

Mobil: 721018073, 731521116, 608719174

www.certes.info, e-mail: certes@certes.info

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.